

BRONCOFLEX® AGILE

Sterilt videobronkoskop til engangsbrug



axessvision
part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.
ANYTIME, ANYWHERE.

BRONCOFLEX® AGILE

GUIDNING OG INSPEKTION


Når Broncoflex® Agile anvendes i kombination med endotrakealtuber, er det nemmere at guide tuberne igennem de anatomiske strukturer og indføre dem på grund af den flettede Pebax® indføringstubes stivhed.

Korrekt anlæggelse af endotrakealtuber med dobbelt lumen kan verificeres fra størrelse 35 Fr og derover.



ERGONOMI OG BEVÆGELIGHED

Den præcise, fleksible bøjeme-kanisme sørger for distal op- og nedadgående vinkling på 220° og faciliterer dermed bronkieundersøgelser, især i øverste højre lungelap.

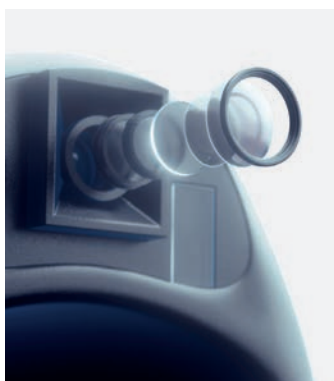

HD-SYSTEM

Hele systemet, lige fra kamera til visualiseringsplatform, bidrager til visning af et HD-billede, og dertil kommer en algoritme, som er udviklet specielt til detaljerede konturer. Styring af lysstyrken giver også et godt nær- og distalbillede.



HÅNDTERING AF SEKRETER

Den distale spids' unikke profil med den brede åbning gør det lettere at opsuge sekreter og væsker.

TEKNISKE EGENSKABER

OPTIK	Synsfeltets retning	0°
	Synsfelt	87.5°
	Feltdybde	5-50mm
	Billedopløsning (pixels)	400x400
	Lyskilde	2 lysdioder
INDFØRINGS-TUBE	Høj/lav udbøjningsvinkel	220°/220°
	Indføringsslanges udvendige diameter	3,6mm
	Distal endes udvendige diameter	3,9mm
	Arbejds længde	605mm
ARBEJDS-KANAL	Indvendig diameter	1,4mm
STERILISATION	Ethylen-oxid	
INSTRUMENT-KOMPATIBILITET	Kompatibel med intubationstube (indvendig diameter)	5mm
	Tube med dobbeltlumen (indvendig diameter)	35Fr
REFERENCER	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000